

NovoPen Echo[®] Plus))

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker din NovoPen Echo[®] Plus til insulininjeksjon for første gang. Det finnes en hurtigveiledning bakerst på denne bruksanvisningen.



Innhold

Oversikt over pennens deler
..... **Innsideomslag**

Innledning **Innsideomslag**

Viktige merknader **1**

Klargjøre pennen til en injeksjon

Sette inn en insulinsylinderampulle.....2
Dersom du bruker hvitt og uklart insulin5
Feste en ny nål.....6
Kontroller ALLTID insulingjennomstrømmingen
før du injiserer8
Velge dose10

Injisere dosen **12**

Etter injeksjonen..... **14**

Hvordan bruke doseminnet

Hvordan kontrollere din forrige dose16
Hva viser doseminnet?17
Hvordan føre en personlig injeksjonslogg18
Hvordan kontrollere hvor mye
insulin som er igjen20

Hvis du trenger mer insulin enn det som er igjen i sylind rampullen**22**

Hvordan bytte ut en brukt insulinsylinderampulle.....**24**

Feil/meldinger i displayet.....**26**

“Error”26
“End”27
Blankt display.....27

Hvordan ta vare på pennen din.....**28**

Håndtering28
Rengjøring.....28
Oppbevaring.....29
Avfallshåndtering.....29
Garanti30
Teknisk informasjon30

Hurtigveiledning finnes på baksiden

NovoPen Echo® Plus))

Penn




Pennehette



Insulin-
skala

Sylinder-
ampulle-
holder

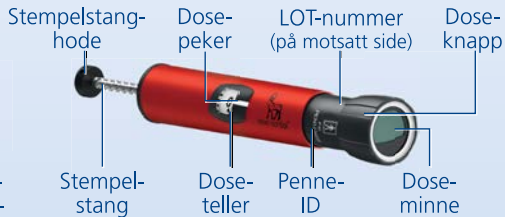

Stempelstang-
hode

Stempel-
stang

Dose-
peker

Dose-
teller

LOT-nummer
(på motsatt side)

Penne-
ID

Dose-
knapp

Dose-
minne

Doseminne



Antall enheter sist injisert

Tid siden forrige injeksjon (timer: minutter: sekunder)

Nål til engangsbruk (eksempel)



Ytre
nålehette

Indre
nålehette

Nål

Papir-
forsegling

Insulinsylinderampulle (Penfill® sylinderampulle 3 ml)



Gjenget
endestykke (for
å feste nåler)

Farget
bånd

Glasskule
(kun i hvitt og
uklart insulin)

Stempel

Innledning

Takk for at du valgte NovoPen Echo® Plus. NovoPen Echo® Plus er en flergangs insulinpenn med doseminnefunksjon.

Pakningen med NovoPen Echo® Plus inneholder én penn, et mykt etui og denne bruksanvisningen.

Du bør lese denne bruksanvisningen nøye før du bruker pennen din – selv om du tidligere har brukt NovoPen Echo® Plus eller andre lignende injeksjonssystemer fra Novo Nordisk. I bruksanvisningen står alt du trenger å vite om pennen din og hvordan den skal brukes.

Bruk kun NovoPen Echo® Plus dersom du er i stand til å følge instruksjonene i denne bruksanvisningen nøyaktig. Hvis ikke, må du få hjelp fra en person som er i stand til å følge instruksjonene.

NovoPen Echo® Plus er beregnet for å brukes for levering av insulin til behandling av diabetespasienter som trenger insulininjeksjoner.

NovoPen Echo® Plus er beregnet for å brukes av diabetespasienter som selv injiserer, av helsepersonell og av omsorgspersoner.

NovoPen Echo® Plus er utformet til personlig bruk av insulin i hjemmet.

NovoPen Echo® Plus injeksjonspenn skal kun brukes sammen med kompatible produkter for å fungere nøyaktig og sikkert. Injeksjonspennen brukes sammen med Penfill® 3 ml sylinderrampuller med insulin fra Novo Nordisk og nåler for engangsbruk (selges separat). Med injeksjonspennen kan brukeren stille inn ønskede doser fra 0,5 til 30 enheter i trinn på 0,5 enheter.

Pennen har et doseminne som hjelper deg å huske antall enheter du sist injiserte og tiden som er gått siden injeksjonen. Doseminnet lagrer også injeksjonshistorikken din for de siste 800 injeksjonene.

Se sidene 18-19 i bruksanvisningen for mer informasjon om hvordan du bruker dette til å føre en personlig injeksjonslogg. Du kan for eksempel overføre injeksjonshistorikken til smarttelefonen din slik at du kan føre en personlig injeksjonslogg.

Pennen er en flergangspenn, det vil si at du kan bruke den om og om igjen. Når du har brukt opp alt insulinet i en sylinderrampulle, bytter du den med en ny sylinderrampulle. Dersom du bruker mer enn en type insulin, anbefales det sterkt at du bruker en egen NovoPen Echo® Plus for hver insulinetype.

Pennen finnes i rødt eller blått.

Husk alltid å kontrollere navnet og fargen på sylinderrampullen før hver injeksjon for å forsikre deg om at den inneholder riktig type insulin.

Om denne bruksanvisningen:

Underveis i denne bruksanvisningen viser instruksjonene trinn for trinn hvordan du bruker pennen. Viktig informasjon og tilleggsinformasjon er tydelig merket med symbolene du ser nedenfor:



Viktig informasjon

Vær særlig oppmerksom på disse merknadene da de er viktige for sikker bruk av pennen. Dersom du ikke følger disse instruksjonene nøye, kan du få for lite eller for mye insulin, eller ikke noe insulin i det hele tatt.





Tilleggsinformasjon



Viktige merknader

- **Dersom du er blind eller har alvorlige synsproblemer, ikke bruk NovoPen Echo® Plus uten hjelp.** Få hjelp av en person med godt syn som kan følge instruksjonene i denne bruksanvisningen nøyaktig.
- **Kontroller ALLTID insulingjennomstrømningen før hver injeksjon.** Ikke bruk pennen dersom insulin ikke spruter fra nålespissen når du kontrollerer gjennomstrømningen. Dersom du ikke tester insulingjennomstrømningen, kan du få for lite insulin eller ikke noe insulin i det hele tatt.
- **Dersom pennen din faller ned,** skal du kontrollere insulinsylinderampullen for skader, for eksempel sprekker. Bytt ut sylinderampullen med en ny, hvis det er nødvendig.
- **Dersom du ved et uhell** mellom injeksjonene **vrir pennen fra hverandre,** er det viktig å kontrollere insulingjennomstrømningen før neste injeksjon. Du må kanskje gjøre dette flere ganger før insulin spruter fra nålespissen. Dersom det ikke kommer til syne insulin, kan det hende du ikke får noe insulin i det hele tatt.
- **NovoPen Echo® Plus er utformet til bruk sammen med Penfill® sylinderampulle 3 ml og NovoFine® Plus, NovoFine® eller NovoTwist® nåler** for engangsbruk med en lengde opptil 8 mm.
- **Novo Nordisk er ikke ansvarlig** for skade som skyldes bruk av NovoPen Echo® Plus sammen med andre produkter enn disse.
- **Kontroller alltid navnet og fargen på sylinderampullen** for å forsikre deg om at den inneholder den typen insulin du trenger. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.
- **Ha alltid med deg en ekstra penn,** ekstra insulin av samme type(r) som du bruker og nye nåler i tilfelle noe mistes eller skades.
- **Del aldri pennen din,** insulinsylinderampuller og nåler med andre personer. De er kun til bruk for deg.
- **Oppbevar alltid pennen din,** insulinsylinderampuller og nåler **utilgjengelig for andre, spesielt barn.**
- **Ha alltid pennen din med deg.** Ikke la den ligge i bilen eller andre steder hvor det kan bli for varmt eller for kaldt.
- Omsorgspersoner må **være veldig forsiktige ved håndtering av brukte nåler** for å redusere risikoen for nålestikk og overføring av smitte.
- **Forveksling av insulin kan få alvorlige medisinske konsekvenser.** Dersom du bruker to typer insulin, anbefales det at du snakker med helsepersonell om hvordan forveksling kan unngås.
- **Les alltid pakningsvedlegget** som følger med pakningen til Penfill® insulinsylinderampuller for informasjon relatert til insulinet.

2 Sette inn en insulinsylinderampulle

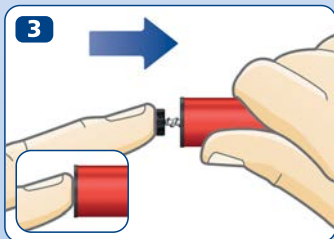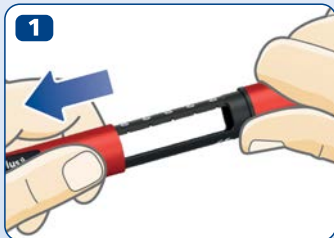

- Dra av penneheten.

- Vri av sylinderampulleholderen. Legg den til side for senere bruk.

- **Stempelstangen kan stikke ut** av pennen. Hvis den gjør det, **trykkes den helt inn** inntil den stopper.

- i** Stempelstangen og stempelstanghodet kan være løse og bevege seg av seg selv. Dette er normalt og påvirker ikke pennens funksjon.

- Ta en ny insulinsylinderampulle. Hold sylinderampulleholderen og la sylinderampullen gli inn med det **gjengete endestykket først**, som illustrert. Fargen på sylinderampullen kan være forskjellig fra den som er vist på illustrasjonen. Dette avhenger av hvilken type insulin du bruker.




Kontroller navnet og fargen på sylinderampullen for å forsikre deg om at den inneholder den typen insulin du trenger. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.

Kontroller at sylinderampullen ikke er skadet, for eksempel med sprekker eller lekkasjer. Se hvordan dette gjøres **i pakningsvedlegget som ligger i pakningen til Penfill® sylinderampulle 3 ml.**

Kontroller at insulinet ser ut som det skal.


I pakningsvedlegget til Penfill® sylinderampulle 3 ml står det hvordan din type insulin skal se ut.

NovoPen Echo® Plus er utformet til bruk sammen med Penfill® sylinderampulle 3 ml og NovoFine® Plus, NovoFine® eller NovoTwist® nåler for engangsbruk med lengde opptil 8 mm.

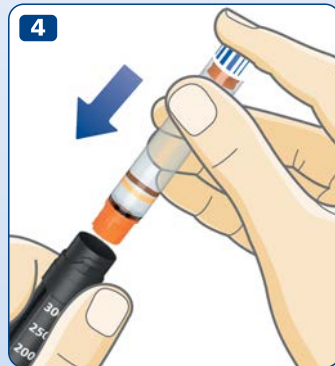

4

5

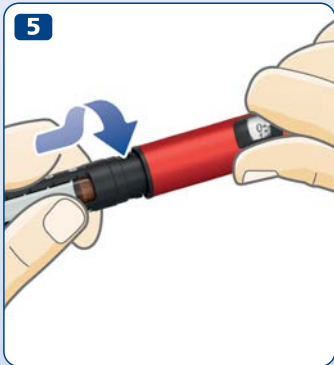

- Vri sylindrampulleholderen på igjen, som illustrert, inntil du **hører eller merker et klikk.**

Dersom du bruker hvitt og uklart insulin

Dersom du bruker en insulinsylinderampulle med uklart insulin (hvit insulinsuspensjon), **bland alltid insulinet godt rett før injeksjonen.** Se pakningsvedlegget til Penfill® sylinderampulle 3 ml for hvordan din type insulin skal blandes.



Forsikre deg om at det er nok plass i sylinderampullen før du blander insulinet godt:

Stempelet skal være **over den hvite streken** på sylinderampulleholderen, når du holder pennen som illustrert. Dette er nødvendig for at glasskulen som er inne i sylinderampullen skal kunne bevege seg fritt for å blande insulinet godt.

Dersom stempelet er under den hvite streken, bytt insulinsylinderampullen med en ny, se *sidene 24-25*.



6 Feste en ny nål

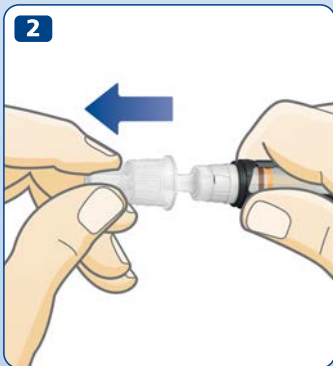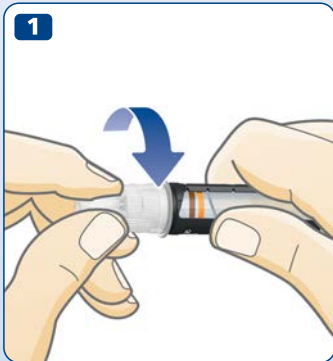

- Ta en ny nål, og riv av papirforseglingen.
- Skyv nålen **rett** på pennen. **Vri til den er godt festet.**

- Dra av den ytre nålehetten og ta vare på den. Du vil trenge den etter injeksjonen for å fjerne nålen fra pennen på en forsvarlig måte.





Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon. Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering.


Bruk aldri en nål som er bøyd eller skadet.

Ikke fest en ny nål til pennen din før du er klar for å ta neste injeksjon.

- Dra av den indre nålehetten og kast den.
En dråpe insulin kan komme til syne på nålespissen. Dette er normalt, men du skal **likevel kontrollere insulingjennomstrømningen.**

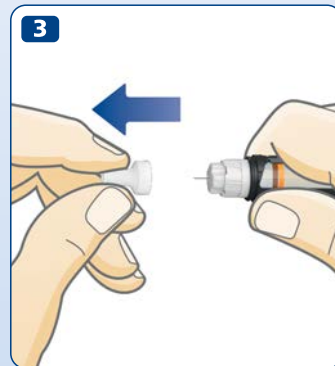

 Nålen er beskyttet av to hetter. Du må fjerne begge hettene. Dersom du glemmer å fjerne begge hettene, vil du ikke få injisert noe insulin, og blodsukkernivået ditt kan bli for høyt.

 NovoPen Echo® Plus er utformet til bruk sammen med Penfill® sylinderrampulle 3 ml og NovoFine® Plus, NovoFine® eller NovoTwist® nåler for engangsbruk med en lengde opptil 8 mm.

8 Kontroller ALLTID insulingjennomstrømningen før du injiserer



Kontroller ALLTID gjennomstrømningen før du injiserer. Fortsett kontrollen helt til det spruter ut insulin fra nålepissen. Dette sikrer at et eventuelt mellomrom og luftbobler blir fjernet og at insulinet kommer ut gjennom nålen.

- **Trekk ut doseknappen**, hvis den ikke allerede er trukket ut.
- Vri doseknappen for å velge **2 enheter**.

- **Trykk inn doseknappen** inntil dosetelleren viser tallet "0". Tallet "0" skal være på linje med dosepekeren.

- Kontroller at **insulin spruter** ut fra nålespissen.

Hvis det ikke kommer insulin til syne, gjenta trinnene 1-3 inntil insulin spruter ut fra nålespissen.


Dersom det ikke kommer insulin til syne etter flere forsøk, kontroller insulinvinduet for å se om det er et mellomrom mellom det sorte stempelstanghodet og stempelet, se *illustrasjoner 3A og 3B*. Dersom du ikke ser noe mellomrom, bytt nålen og kontroller insulingjennomstrømningen igjen.

Kontrollen av insulingjennomstrømningen er fullført når du ser at insulin spruter ut fra nålespissen.




Ikke prøv å injisere insulin hvis det ikke kommer noe insulin til syne. Det kan hende at du ikke får i deg noe insulin selv om dosetelleren beveger seg. Dette kan føre til for høyt blodsukker (hyperglykemi).

Dersom det ikke kommer insulin til syne etter gjentatte ganger med kontrollering av gjennomstrømningen, skal pennen ikke brukes. Kontakt din leverandør for å få en ny penn.

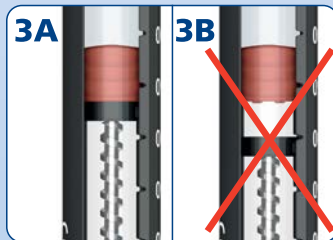

10 Velge dose

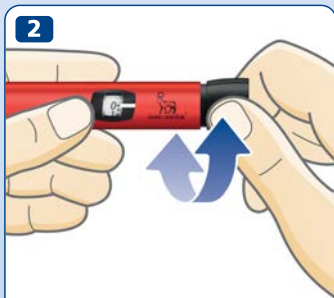

2,5 enheter
valgt



12 enheter
valgt

- **Trekk ut doseknappen**, hvis den ikke allerede er trukket ut.
- **Forsikre deg om at dosetelleren viser "0" før du begynner.**
Tallet "0" skal komme på linje med dosepekeren.

- **Vri doseknappen for å velge den dosen du trenger.**
Du kan vri doseknappen **forover eller bakover** for å justere dosen.

- i** Doseknappen endrer antall enheter. Det er kun dosetelleren og dosepekeren som viser hvor mange enheter du velger per dose.
Du kan velge opptil 30 enheter per dose.
Halve enheter vises som streker mellom tallene.



Se alltid i insulinvinduet for å **forsikre deg om at insulinet i pennen din ser ut som det skal**. I pakningsvedlegget til Penfill® sylinderrampulle 3 ml står det hvordan din type insulin skal se ut.

Bruk alltid dosetelleren og dosepekeren for å se hvor mange enheter du velger.

Bruk ikke insulinskalaen på sylinderrampulleholderen. Den viser kun omtrent hvor mye insulin som er igjen i pennen din.

Ikke tell penneklikkene.

Dersom du velger og injiserer feil dose, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.



Dersom du trenger mer enn 30 enheter, kan du velge å bruke et annet Novo Nordisk insulininjeksjonssystem med en høyere maksimal dose.

Doseknappen skal være lett å vri. Ikke bruk kraft når du vrir på den.

Når pennen inneholder mindre enn 30 enheter, stopper dosetelleren på det antall enheter som er igjen. Hvis du trenger mer insulin enn det som er igjen i sylinderrampullen, se *sidene 22-23*.

12 Injisere dosen



Kontroller ALLTID gjennomstrømningen før du injiserer.

- **Kontroller navnet og fargen** på sylindrampullen for å forsikre deg om at den inneholder den typen insulin du trenger. Dersom du tar feil type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.
- **Forsikre deg om at du kan se dosetelleren.**
- **Stikk nålen inn i huden** slik legen eller sykepleieren din har vist deg.
- **Trykk inn doseknappen** inntil dosetelleren viser tallet "0". Tallet "0" skal komme på linje med dosepekeren. Du kan da høre eller merke et klikk.
- **La nålen bli værende under huden etter** at dosetelleren har gått tilbake til "0", og **tell sakte til 6**. Dersom nålen blir fjernet tidligere, kan du kanskje se at det kommer en sprut med insulin fra nålespissen. Hvis dette skjer vil ikke hele dosen bli injisert, og du bør øke antall kontroller av blodsukkernivået ditt.

- **Trekk nålen ut fra huden.**
- **Etter injeksjonen** lagres informasjonen om dosen din i doseminnet. *Se sidene 16-17.*


 **Injiser alltid ved å trykke inn doseknappen. Ikke vri på den.** Dersom du vrir på doseknappen, vil det **ikke** bli injisert noe insulin.

Se alltid på dosetelleren for å vite hvor mange enheter du injiserer. Ikke tell penneklikkene. Dosetelleren vil vise det eksakte antall enheter.

Dersom doseknappen stopper før dosetelleren viser tallet "0", kan nålen være tett. Vri dosetelleren tilbake til "0" og bytt ut nålen med en ny. Kontroller insulingjennomstrømningen og injiser hele dosen.

 Det kan hende du ser en dråpe insulin på nålespissen etter injisering. Dette er normalt og har ingen innvirkning på dosen din.

Normal bruk av pennen **kan føre til reaksjoner på injeksjonsstedet.** Rådfør deg alltid med lege eller sykepleier hvis du er i tvil.

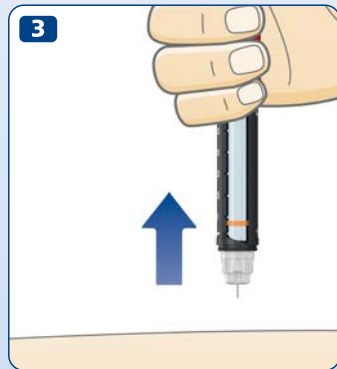

14 Etter injeksjonen



- Fjern nålen med en gang ved å skru den av i en kanylebøtte.

- Hvis du ikke har en kanylebøtte, skal du bruke en enhåndsmetode for å sette på nålehetten. **Før nålespissen inn i den ytre nålehetten** på en plan overflate uten å berøre nålen.

- Ikke rør den ytre nålehetten før den dekker nålen.
- Når nålen er tildekket, **trykk forsiktig den ytre nålehetten ordentlig på.**


 **Forsøk aldri å sette den indre nålehetten på nålen igjen.** Du kan stikke deg på nålen.

- Hold i den sorte sylinderrampulleholderen og skru av nålen. Kast den på forsvarlig vis slik din lege eller sykepleier har instruert deg.


- **Sett pennehetten på** pennen igjen etter hver bruk for å beskytte insulinet mot lys.
- Oppbevar pennen på en forsvarlig måte. Pennen skal **oppbevares utilgjengelig for andre, spesielt barn,** se side 29 for hvordan du oppbevarer pennen.

! **Hold alltid i den sorte sylinderrampulleholderen når du skruv av nålen.** Hvis ikke kan du komme til å skru pennen fra hverandre. Hvis dette skjer, skru pennen sammen igjen. Bytt nålen og kontroller insulingjennomstrømningen før din neste injeksjon for å sikre at du får hele dosen.

Fjern alltid den brukte nålen og kast den forsvarlig, for eksempel i en kanylebøtte, som instruert av din lege eller sykepleier. Dette reduserer risikoen for tette nåler, urenheter, infeksjon og unøyaktig dosering. Ikke oppbevar pennen med påsatt nål.

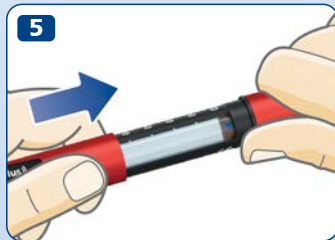

16 Hvordan kontrollere din forrige dose

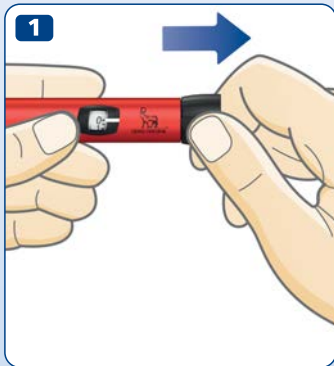

- Forsikre deg om at dosetelleren viser tallet "0" før du begynner. Tallet "0" skal komme på linje med dosepekeren.
- Trekk ut doseknappen og trykk den inn igjen. Ikke vri doseknappen.

Doseminnet vil nå vise detaljene fra din forrige dose.
Etter 15 sekunder slår displayet seg av.

- i** **Ikke vri på doseknappen** når du kontrollerer din forrige dose. Hvis du vrir og så trykker den inn, vil detaljene om din forrige dose overskrives. Hvis du vrir doseknappen ved et uhell er det bare å vri den tilbake til tallet "0" før du trykker den inn. Dette vil **ikke** overskrive detaljene om din forrige dose.

- Antall enheter som sist ble injisert.
- Tiden som har gått siden siste injeksjon (timer:minutter:sekunder).

Tre eksempler vises til høyre.

- **Doseminnet viser kun detaljene fra den siste injeksjonen eller fra kontrollen av insulingjennomstrømningen.** Dette betyr at når du kontrollerer insulingjennomstrømningen før en ny injeksjon, vil detaljene fra din forrige injeksjon overskrives.

Doseminnet i pennen din lagrer injeksjonshistorikken din fra de siste 800 injeksjonene. Se *sidene 18-19* om hvordan du bruker denne informasjonen til å føre en personlig injeksjonslogg.



Doseminnet forteller deg **ikke** hvor mye insulin du trenger til din neste injeksjon. Dersom du er i tvil om hvor mye insulin du trenger å injisere, kontrollerer blodsukkernivået ditt. Ellers kan du få for mye eller for lite insulin.

Dersom du mistenker at doseminnet viser uriktige detaljer, for eksempel hvis du har håndtert pennen på en annen måte enn tiltenkt, skal du alltid kontrollere blodsukkernivået ditt før du velger dosen til din neste injeksjon.

1



5,5 enheter
injisert for
3 timer,
45 minutter
og
10 sekunder
siden

2



10 enheter
injisert for
35 minutter
og
50 sekunder
siden

3



8,5 enheter
injisert for
36 timer,
45 minutter
og
18 sekunder
siden

18 Hvordan føre en personlig injeksjonslogg

Doseminnet i pennen din støtter nærfeltskommunikasjon (NFC). **Dersom du har en smarttelefon, et nettbrett, en datamaskin, et blodsukkerapparat eller en annen enhet som også støtter NFC**, kan du overføre injeksjonshistorikken fra pennen din til denne enheten for å føre en personlig injeksjonslogg. Forsikre deg bare om at enheten din har en app som kan kobles til pennen eller en annen programvare som kan lese og vise dine injeksjonsdetaljer.

Doseminnet må aktiveres for å kunne kobles til enheten. For å aktivere doseminnet må du stille inn en dose som er større enn null og trykke doseknappen helt inn. Dette kan gjøres med eller uten en insulinsylinderampulle satt inn i pennen. Dersom det gjøres med en insulinsylinderampulle innsatt må en nål festes til pennen.

Doseminnet er fullstendig aktivert når doseminnet viser detaljene for den første dosen som nettopp er tatt. Du må ikke stille inn en ny dose før doseminnet er fullstendig aktivert. Aktivering av doseminnet er kun nødvendig første gang en ny penn tas i bruk.

- 1 Kontroller om enheten din støtter NFC.**
Sjekk bruksanvisningen til enheten din for å finne ut om enheten støtter NFC, og sjekk også eksakt hvor feltet for NFC er plassert på enheten din.
En oversikt over smarttelefoner som kan kobles sammen med **NovoPen Echo® Plus** finnes på <https://www.novonordisk.no/smartpens.html>.
- 2 Kontroller om utstyret ditt har en kompatibel app eller en annen programvare som kan lese dine injeksjonsdetaljer.**
Dersom enheten din ikke har en kompatibel app eller annen programvare, kan du finne og laste ned en, eller du kan kontakte din leverandør av Novo Nordisk produkter for informasjon.
En oversikt over apper som fungerer sammen med **NovoPen Echo® Plus** finnes på <https://www.novonordisk.no/smartpens.html>.
- 3 Kontroller din app eller annen programvare for å finne ut:**
 - hvordan du forbereder enheten for informasjonsoverføring.
 - hvordan du kan se dine injeksjonsdetaljer.





4 Overfør injeksjonshistorikken din til enheten.

- **Finn** feltet for NFC på enheten din.
- **Hold** pennens doseminne rett mot feltet for NFC på enheten din og forsikre deg om at pennen forblir i kontakt med NFC-feltet.
- **Hold posisjonen** og **vent** mens detaljene fra dine siste injeksjoner automatisk overføres til enheten din.



**Eksempel på
penne-ID**

Pennen din har en unik ID som er lokalisert på doseknappen, som vist.

Når du ser din personlige injeksjonslogg på enheten din, er pennens ID koblet til dine injeksjonsdetaljer.

Dersom du bruker forskjellige pennen til ulike typer insulin, skal du kontrollere pennens ID. Den vil fortelle deg hvilken av dine pennen injeksjonsdetaljene kommer fra.

20 Hvordan kontrollere hvor mye insulin som er igjen



Dosetelleren kan vise deg nøyaktig hvor mye insulin som er igjen i sylind rampullen, når det er mindre enn 30 enheter igjen.

- **Vri doseknappen** til den stopper.
- Kontroller dosetelleren:
 - Hvis den viser "30": **30 enheter eller mer** er igjen i sylind rampullen.
 - Hvis den viser mindre enn "30": **Den viser antall enheter som er igjen** i sylind rampullen.
- Vri doseknappen tilbake inntil dosetelleren viser tallet "0".

- Bruk **insulinskalaen** for å se **omtrent** hvor mye insulin som er igjen i insulinsylinderampullen.



- i** Hvis du trenger mer insulin enn det som er igjen i sylinderampullen, ta hele dosen fra en ny sylinderampulle, se side 22.

22 Hvis du trenger mer insulin enn det som er igjen i sylinderrampullen



Hvis du trenger mer insulin enn det som er igjen i sylinderrampullen, **ta hele dosen fra en ny sylinderrampulle.**

- Fjern nålen. Vri av sylinderrampulleholderen og kast den brukte sylinderrampullen.
- Sett inn en ny sylinderrampulle, se *sidene 2-4*.



- Fest en ny nål og **kontroller insulingjennomstrømningen**, se *sidene 6-9*.



- Velg dose og injiser **hele dosen med den nye sylinderrampullen**, se *sidene 10-13*.



Kun hvis du har fått rådgivning fra lege eller sykepleier kan du dele opp dosen din mellom to sylind rampuller.

Hvis du blir distraheret, regner feil eller glemmer å kontrollere gjennomstrømningen, kan du få en under- eller overdose som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Dersom du føler deg uvel etter at dosen er blitt delt opp, kontroller blodsukkernivået og/eller kontakt legen din eller sykepleier.

Dersom du deler opp dosen din:

- 1** **Kontroller insulingjennomstrømningen.**
- 2** Finn ut nøyaktig hvor mye insulin som er igjen, og skriv det ned. Vri doseknappen til den stopper. Dose telleren viser da antall enheter som er igjen i sylind rampullen.
- 3** Injiser alt insulinet som er igjen i sylind rampullen.
- 4** Regn ut hvor mange flere enheter du trenger for å fullføre dosen din.
- 5** Fjern den brukte nålen og sylind rampullen.
- 6** Sett inn og klargjør en ny sylind rampulle for injeksjon.
- 7** Fest en ny nål og **kontroller insulingjennomstrømningen.**
- 8** Velg dose og injiser den resterende dosen med den nye sylind rampullen.




Dersom du deler opp dosen i to injeksjoner, vil doseminnet kun lagre informasjon om den andre (siste) injeksjonen.

24 Hvordan bytte ut en brukt insulinsylinderampulle

1



2

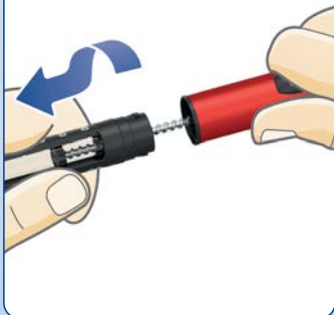

- **Fjern og kast nålen** fra pennen din dersom nålen fremdeles er på, *se sidene 14-15*.

- Vri av sylinderampulleholderen.

i Når du vrir av sylinderampulleholderen, stikker stempelstangen ut av pennen. Den kan bevege seg frem eller tilbake på egen hånd. Trykk den inn igjen *som instruert på side 2*.

- Hold sylindrampulleholderen lett på skrå og **la sylindrampullen gli ut.** Kast den slik som din lege eller sykepleier har fortalt deg.
- Trykk inn stempelstangen igjen. **Sett deretter inn en ny sylindrampulle** og vri sylindrampulleholderen på igjen. Fest en ny nål og kontroller insulingjennomstrømningen, se *sidene 6-9*.





“Error”

Forrige injeksjon er ikke registrert i doseminnet

Dersom du ser denne meldingen, har du fått insulinet du sist injiserte, men doseminnet registrerte ikke denne injeksjonen.

Hva skal jeg gjøre?

Du kan fremdeles bruke pennen til injeksjon av insulin. Dersom du er i tvil om hvor mye insulin du injiserte og hvor lang tid det har gått siden din forrige injeksjon, kontroller blodsukkernivået ditt flere ganger før du injiserer mer insulin.

Normalt vil doseminnet fungere igjen etter din neste injeksjon.
Hvis ikke, kontakt din leverandør for å få en ny penn.

Batteriet fungerer fremdeles.



“End”

Pennens levetid nærmer seg slutten

Batteriet er i ferd med å bli utladet, og doseminnets levetid nærmer seg slutten.

Hva skal jeg gjøre?

Kontakt din leverandør for å få en ny penn. Du kan fremdeles bruke pennen din til injeksjon av insulin inntil du får en ny penn.

Doseminnet fungerer, men nærmer seg slutten av sin levetid. Når pennens levetid er over, vil displayet bli blankt.

Pennen varer i fire til fem år. *Se side 30* for informasjon om garanti.



Blankt display

Doseminnet er inaktivt eller batteriet er utladet

Doseminnet har ikke blitt aktivert, eller batteriet er utladet.

Hva skal jeg gjøre?

Forsikre deg om at doseminnet er aktivert.

Doseminnet blir aktivert når du injiserer med din NovoPen Echo® Plus for første gang.

Hvis du har brukt din NovoPen Echo® Plus til en injeksjon: Trekk ut doseknappen og trykk den inn igjen for å se detaljene fra din forrige dose. Hvis displayet forblir tomt er batteriet utladet.

Kontakt din leverandør for å få en ny penn. Du kan fremdeles bruke pennen til injeksjon av insulin inntil du får en ny penn. *Se side 30* for informasjon om garanti.

28 Hvordan ta vare på pennen din

Håndtering

- **Bruk kun NovoPen Echo® Plus** som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- **Ikke mist pennen din** eller slå den mot et hardt underlag. Hvis du mister den eller mistenker at det er noe galt, kontroller insulinsylinderampullen for skader, for eksempel sprekker. Hvis nødvendig, bytt sylinderampullen med en ny.
- **Beskytt pennen** mot direkte sollys, og ikke utsett den for støv, skitt, væske eller ekstreme temperaturer.
- **Ikke forsøk å reparere pennen** eller ta den fra hverandre.
- Pennen din har et innebygd litiumbatteri. Av hensyn til din sikkerhet skal det ikke byttes ut. Når batteriet er utladet, skal du kontakte din leverandør for å få en ny penn. Du kan fremdeles bruke pennen til injeksjon av insulin uten å bruke doseminnet.



Batteriet varer i fire til fem år dersom det tas i bruk for første gang før den datoen som er trykket ved siden av dette symbolet på den ytre emballasjen.

Rengjøring

- **Rengjør pennen din kun** med en klut fuktet med mildt vaskemiddel.
- **Du skal ikke vaske, dyppe den i væske eller smøre pennen din.** Ikke bruk produkter som inneholder blekemidler, slik som klor, jod eller alkohol for å rengjøre pennen din. Dette kan skade den.
- Dersom det har kommet insulin på utsiden av pennen, **tørk det bort** med en fuktet klut med mildt vaskemiddel, **før insulinet tørker inn.**

Oppbevaring

- Når en insulinsylinderampulle er satt inn, vennligst se oppbevaringsbetingelsene i pakningsvedlegget i pakningen til Penfill® sylinderampulle 3 ml.
- Pennen oppbevares i romtemperatur når den ikke inneholder en insulinsylinderampulle.
- **Ikke oppbevar pennen med påsatt nål.**
- **Pennen din skal ikke fryses** eller oppbevares i et kjøleskap eller ved siden av et kjøleelement.
- **Oppbevar insulinsylinderampullene** som instruert i pakningsvedlegget til Penfill® sylinderampulle 3 ml. I pakningsvedlegget finner du også informasjon om utløpsdato. Utløpsdatoen som er trykket på sylinderampullen gjelder for ubrukte sylinderampuller oppbevart i kjøleskap. Bruk aldri sylinderampullen etter utløpsdatoen som er angitt på sylinderampullen eller esken.

Avfallshåndtering

- **Ikke kast pennen** sammen med husholdningsavfall.
- **Kast pennen slik som lege, sykepleier, apotek eller lokale myndigheter har instruert deg.** Ta miljøsyn når du kaster pennen. Den inneholder et litiumbatteri, elektroniske deler og resirkulerbare materialer. Forsikre deg også om at insulinsylinderampullen og nålen er fjernet før du kaster pennen.
- Pakkematerialet kan gjenvinnes.



Kast elektronisk utstyr separat.

Garanti

Garantien for NovoPen Echo® Plus er 3 år, dette inkluderer også doseminnet.

Hvis du finner ut at din NovoPen Echo® Plus er defekt vil Novo Nordisk erstatte den. Returner den til leverandøren for undersøkelse innen 3 år etter at du mottok den. Legg ved kvitteringen du fikk da du mottok NovoPen Echo® Plus.

For kunder i Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS): Dersom du har grunn til å tro at en alvorlig hendelse har inntruffet ved bruk av NovoPen Echo® Plus, vennligst rapporter det til Novo Nordisk A/S og til dine nasjonale myndigheter.

Tilvirkeren kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle problemer som er oppstått med NovoPen Echo® Plus hvis ikke bruksanvisningen er blitt fulgt.

Dersom du mener at informasjonen i denne bruksanvisningen er feil, skal du kontakte leverandøren din for å avklare problemet.

Dersom du trenger LOT-nummeret til pennen din, finner du dette på doseknappen som vist i tegningen på innsiden av dette omslaget.

NovoPen Echo®, Penfill®, NovoFine® og NovoTwist® er registrerte varemerker eiet av Novo Nordisk A/S, Danmark.

N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.

Teknisk informasjon

Novo Nordisk A/S erklærer herved at radioutstyrtypen NovoPen Echo® Plus samsvarer med kravene i direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <http://bit.ly/NovoPenEchoPlus>

NovoPen Echo® Plus oppfyller spesifikasjonsgrensene for dosenøyaktighet (viktig ytelse) i henhold til ISO 11608-1 Injeksjonspenner til Medisinsk bruk, Del 1: Krav og testmetoder.

Betingelser for oppbevaring og bruk

Uten insulinsylinderampulle satt inn:

- Temperatur: 5 °C til 40 °C
- Fuktighet: 15 % RH til 93 % RH
- Trykk: 700 hPa til 1060 hPa.

Med insulinsylinderampulle satt inn:

Se instruksjonene i pakningsvedlegget til Penfill® sylinderampulle 3 ml som følger med pakningen til Penfill® sylinderampulle 3 ml.

Bruksmåte

Kontinuerlig bruk.

Beskyttelse mot inntrengning

NovoPen Echo® Plus er etter beskyttelsesgrad (*Ingress Protection rating*) klassifisert som IP52, hvor:

- 5 indikerer beskyttelse mot skadelige mengder støv.
- 2 indikerer beskyttelse mot vertikalt fallende vanndråper når enheten heller inntil 15°.

NovoPen Echo® Plus er ikke vanntett.

Beskyttelsesgrad IP52 betyr at enheten tåler vann kun under visse betingelser. Det anbefales derfor å holde den borte fra vann og andre væsker.



Beskyttelse mot elektrisk støt

Type: Elektromedisinsk utstyr som drives med intern strømforsyning.

Grad: Anvendt del av type BF.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Selv om NovoPen Echo® Plus er utformet slik at den beskytter mot skadelig interferens i et hjemmemiljø, genererer den, bruker den og den kan utstråle radiofrekvent (RF) energi.

Interferens kan derfor forekomme under visse omstendigheter.

Din injeksjon styres ikke av elektronikk og dosenøyaktigheten vil derfor ikke påvirkes av elektromagnetisk interferens.



CE
0123

Utstedelsesdato: 09/2023

© 2023
novonordisk.com

Tilvirket av:
Novo Nordisk (China)
Pharmaceuticals Co. Ltd.
99 Nanhai Road, TEDA
300457 Tianjin, Folkerepublikken Kina

 For
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd, Danmark

8-4261-41-020-3


novo nordisk®